




DASH<sup>+</sup>

BEDIENUNGSANLEITUNG



## GRENCO DASH+ EXPLOSIONSANSICHT

Das Produkt verdampft Cannabinoide durch Erhitzen von Cannabisblüten in der Heizkammer, und die Wirkstoffe der Cannabinoide gelangen durch die Lungenbläschen in den Körper.

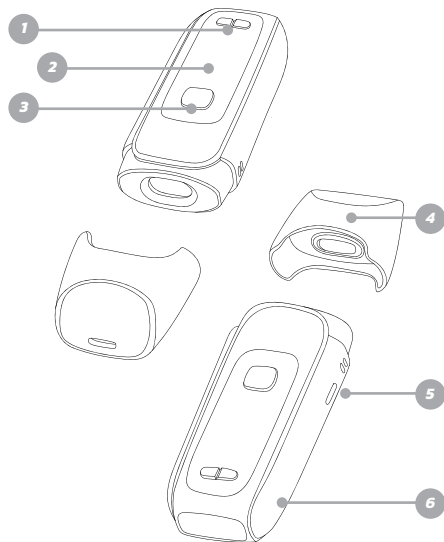

1. Tasten zur Temperatureinstellung
2. Session Timer und Temperaturanzeige
3. Einschalttaste
4. Abnehmbares Mundstück
5. USB-C-Ladeanschluss
6. Gerät Körper

## ERLÄUTERUNG: SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG UND IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG



Symbol Anleitung lesen. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.



Warnsymbol. Um Personenschäden zu vermeiden und das medizinische Produkt zu schützen, ist die Einhaltung der Anweisungen mit diesem Symbol zwingend erforderlich.



Sicherheitssymbol. Um Schäden am medizinischen Produkt zu vermeiden, müssen die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen unbedingt beachtet werden.



Hersteller-Symbol. Der Name und die Adresse des Herstellers stehen neben diesem Symbol.



Symbol für die Seriennummer. Hinter diesem Symbol befindet sich die Seriennummer des medizinischen Produkts.



Symbol für die Losnummer. Hinter diesem Symbol steht die Losnummer der Produktion des medizinischen Produkts.



Symbol für das Herstellungsdatum. Nach diesem Symbol folgt das Datum, an dem das medizinische Produkt hergestellt wurde.



Symbol für das Verfallsdatum. Dieses Symbol befindet sich neben dem Datum (Jahr/Monat), bis zu dem das medizinische Produkt verwendet werden muss.



Verwenden Sie das medizinische Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Schützen Sie das medizinische Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.



Das medizinische Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Es handelt sich um Anwendungsteile, die in direkten elektrischen Kontakt mit dem Patienten kommen.



Das medizinische Produkt darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Wiederverwertung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden.

## WARNUNGEN



- Das medizinische Gerät ist ausschließlich für die Verdampfung der empfohlenen Cannabinoide aus getrockneten Blüten bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung illegaler Substanzen vorgesehen und sollte nur von Erwachsenen über achtzehn Jahren verwendet werden. Jede andere Verwendung ist untersagt.
- Personen, die Hilfe benötigen, müssen während der Anwendung ständig beaufsichtigt werden, da das Medizinprodukt kleine Komponenten enthält, die die Atemwege blockieren und möglicherweise zum Erstickten führen können. Achten Sie daher immer darauf, dass das Medizinprodukt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus des Medizinprodukts ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Kabel für das Medizinprodukt und vermeiden Sie unbeaufsichtigtes Aufladen.
- Das Medizinprodukt bietet eine hocheffiziente und sichere Methode zur alveolären Cannabinoid-Applikation.
- Vor Beginn der Behandlung müssen sich die Patienten einer medizinischen Beurteilung durch einen zugelassenen Arzt unterziehen.
- Die Verwendung ist Patienten ab 18 Jahren vorbehalten, nachdem sie diese Anleitung gründlich durchgelesen und die Empfehlungen des Arztes befolgt haben.
- Erwachsene können das Medizinprodukt unter Beachtung dieser Gebrauchsanweisung oder nach Anweisung ihres Arztes verwenden.
- Verzichten Sie auf die Verwendung des medizinischen Geräts, wenn der Patient an Atemwegs- oder Lungenerkrankungen leidet, da die Dämpfe zu Reizungen und Husten führen können.

- Verwenden Sie nur medizinische Cannabisblüten in dem medizinischen Gerät, wie von Ihrem Arzt verschrieben.
- Der ideale Temperaturbereich für die Cannabinoidextraktion liegt zwischen 180°C und 210°C. Nach dem Einatmen werden die Cannabinoide schnell in den Lungenbläschen absorbiert, und ihre Wirkung tritt innerhalb von Minuten ein.

## SICHERHEITS- UND VORSICHTSHINWEISE



- Überprüfen Sie die Verpackung und das Gehäuse des Medizinprodukts. Wenn Sie eine Beschädigung des Gehäuses des Medizinprodukts feststellen, verwenden Sie das Medizinprodukt nicht mehr und wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst. Wartungsarbeiten und Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen. Der Hersteller und Importeur haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, falsche, illegale oder unangemessene Verwendung verursacht werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus darauf, dass Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Kabel des Medizinprodukts verwenden.
- Reinigen Sie das Medizinprodukt ausschließlich mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie das medizinische Gerät oder den Netzadapter niemals in Flüssigkeiten ein. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und nassen Bedingungen fern.
- Vermeiden Sie es, das medizinische Gerät direktem Sonnenlicht, Regen oder extremen Temperaturen auszusetzen. Starke Schwankungen der Umgebungstemperatur können zu Kondensation führen und die Funktion des Medizinprodukts beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Medizinprodukt in einem Umgebungstemperaturbereich von +5°C bis +30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 15% und 90% und einem Luftdruck zwischen 700 hPa und 1050 hPa. Wenn die Temperatur des Mundstücks +43°C überschreitet, schaltet sich das Medizinprodukt automatisch für 20 Minuten ab, damit das Mundstück auf eine sichere Betriebstemperatur abkühlen kann.

## VERWENDUNGSZWECK

**DER GRENCO MEDICAL ELITE II VAPORIZER IST FÜR DEN GEBRAUCH ZU HAUSE, IM KRANKENHAUS ODER IN DER ARZTPRAXIS ZUR VERDAMPFUNG VON CANNABISBLÜTEN UND ZUR INHALATION DER DARAUS GEWONNENEN CANNABINOIDE BESTIMMT. DIE WIRKSTOFFE DER INHALIERTEN CANNABINOIDE WERDEN DEM MENSCHLICHEN KÖRPER ÜBER DIE LUNGENBLÄSCHEN FÜR DIE ENTSPRECHENDE MEDIZINISCHE INDIKATION ZUGEFÜHRT, WIE VON IHREM ARZT VERORDNET. DIE VERWENDUNG IST FÜR PATIENTEN BESTIMMT, DIE ÄLTER ALS 18 JAHRE ALT SIND.**

## KONTRAINDIKATIONEN

- Für den Dash+ Vaporizer gibt es keine gerätespezifischen Kontraindikationen.
- Bei Vorerkrankungen der Atemwege oder der Lunge sollte der Dash+ Vaporizer jedoch nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt angewendet werden. Die Dämpfe können Reizungen der Atemwege und der Lunge verursachen, die je nach Dampfdichte innerhalb weniger Minuten zu Hustenanfällen führen können.

## AUSPACKEN UND INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie den Dash+ Vaporizer und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Registrieren Sie die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts unter [gpen.com/Register](https://gpen.com/Register).
2. Laden Sie den Dash+ Vaporizer mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel vollständig auf.
3. Mahlen Sie Cannabisblüten.
4. Entfernen Sie das Mundstück und füllen Sie die Heizkammer mit gemahlenen, trockenen Kräutern.
5. Setzen Sie das Mundstück wieder auf.
6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- und auszuschalten.
7. Drücken Sie die unteren linken und rechten Tasten, um die Temperatur einzustellen (linke Taste = verringern / rechte Taste = erhöhen).
8. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal innerhalb von 2 Sekunden, um eine Sitzung zu aktivieren oder abubrechen.
9. Das Gerät vibriert und der Countdown des Session Timers beginnt, sobald die Temperatur erreicht ist.
10. Sobald der Session Timer auf 0:00 herunterzählt, beginnt die Heizung.
11. Sie schaltet sich automatisch ab und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.
12. Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach einer Minute automatisch aus, wenn keine Aktion erfolgt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie den Dash+ Vaporizer nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch und wischen Sie den Inhalationsanschluss bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzteil niemals in Flüssigkeiten.
2. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist. Tränken Sie anschließend ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (ISO) und drücken Sie überschüssigen Alkohol aus, bevor Sie es auf Ihr Gerät auftragen.
3. Wischen Sie rund um den Silikoneinsatz und über den Bildschirm.

4. Entfernen Sie den Silikoneinsatz und reinigen Sie die Innenwände und die Luftöffnung des Mundstücks.
5. Für eine noch gründlichere Reinigung entfernen Sie das Sieb vom Silikoneinsatz und entfernen den spiralförmigen Keramik-Luftkanal.
6. Weichen Sie alle drei Komponenten des Einsatzes zusammen mit dem äußeren Zirkonoxid-Mundstück in ISO ein. Nehmen Sie das Mundstück aus dem ISO, spülen Sie es gründlich mit Wasser ab und lassen Sie es lufttrocknen.
7. Setzen Sie alle Komponenten des Einsatzes und des Mundstücks zusammen und aktivieren Sie eine Sitzung bei maximaler Temperatur, um restliches ISO zu verbrennen.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Gerätename:** Vaporizer

**Gerätemodell:** Dash+

**IP-Klassifizierung:** IP22

**Transport- und Lagerbedingungen:**

- -20°C ~ 60°C
- 15% ~ 90%
- 700hPa ~ 1060hPa"

**Betriebsbedingungen:**

- 5°C ~ 35°C
- 15% ~ 90%
- 700hPa ~ 1060hPa

**Heiztemperaturbereich:** 180°C ~ 210°C

**Interne Stromversorgung**

**Batterie:** Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (2100 mAh) mit Typ-C-Schnellladefunktion

**Softwareversion:** XXX



QR-Code scannen  
für Anleitungsvideo



Anleitungsvideos, Informationen und mehr finden Sie  
unter: [GPEN.COM/DASHPLUS](https://GPEN.COM/DASHPLUS)

***HELP@GPEN.COM***

**© 2024 GRENCO SCIENCE™**



Designed in Los Angeles / Made in PRC